

Руководство пользователя Lumiflex Cloud

Для аккаунта пациента

Содержание

1	Предполагаемое использование облачного сервиса Lumiflex Cloud	1
2	Системные требования и меры предосторожности	2
3	Регистрация в облачном сервисе	3
4	Вход в аккаунт после регистрации	5
5	Главная страница	6
6	Формирование отчета AGP	8
7	Настройка обмена данных об уровне глюкозы	10
8	Настройки личного профиля	14

Предполагаемое использование облачного сервиса Lumiflex Cloud

Lumiflex Cloud предназначен для использования пациентами с диабетом, их опекунами и лечащими врачами с целью просмотра, анализа и оценки данных с устройств при мониторинге глюкозы для поддержки эффективного управления диабетом.

Дополнительно



Lumiflex Cloud является вспомогательным средством просмотра данных и не предназначен для принятия решений по лечению или замены профессиональной медицинской консультации.



Lumiflex Cloud не предназначен для немедленного принятия клинических решений и не заменяет самоконтроль уровня глюкозы, рекомендованный лечащим врачом.



Домашние пользователи должны проконсультироваться с медицинским работником перед любой медицинской интерпретацией и корректировкой терапии на основе информации, содержащейся в программном обеспечении.

Системные требования и меры предосторожности



Обеспечьте оптимальную производительность и безопасность с помощью правильной настройки.

Системные требования



Поддерживаемые браузеры. Веб-приложение Lumiflex Cloud разработано для работы в Google Chrome версии 85 или выше. Для обеспечения полной функциональности необходимо включить JavaScript и разрешить всплывающие окна.



Поддерживаемые операционные системы. Приложение протестировано для обеспечения бесперебойной работы в Chrome под управлением Windows 10, macOS 10.15+ и дистрибутивов Linux (например, Ubuntu 20.04+).



Минимальные аппаратные/программные требования. Для оптимального отображения информации минимальное разрешение экрана должно быть 1920 × 1080. Для наилучшей производительности необходимо обеспечить стабильное интернет-соединение.





Критические меры предосторожности

1. **Подключение.** Включает Bluetooth и сеть на мобильных устройствах для обмена данными в реальном времени. Компьютер должен поддерживать стабильное интернет-соединение.
2. **Риски передачи данных.** Проблемы с устройством, Bluetooth или сетью могут привести к задержке или сбою передачи данных опекунам.
3. **Питание.** Обеспечивает стабильное питание во время подключения устройства и обработки данных. Не следует использовать платформу при низком уровне заряда батареи.
4. **Серьезные инциденты.** Немедленно сообщите производителю и соответствующим органам о любых серьезных травмах или смертельных случаях, связанных с устройством.


Регистрация в облачном сервисе


<https://cloud.lumiflex.ru/login>


Процесс регистрации

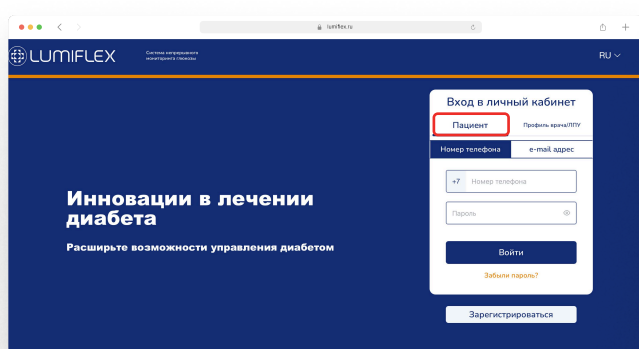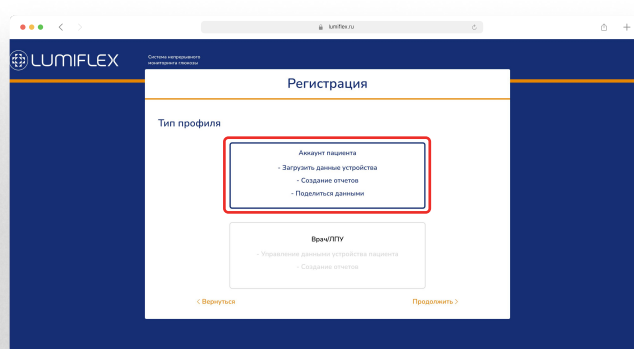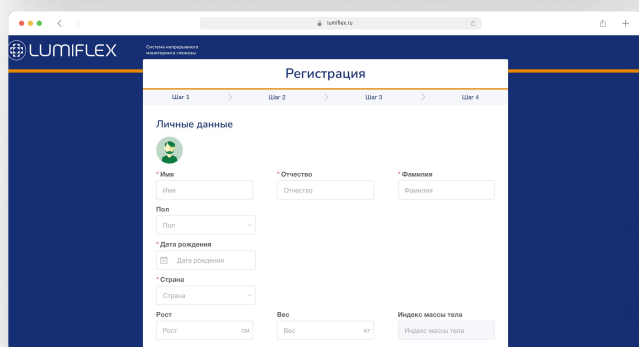
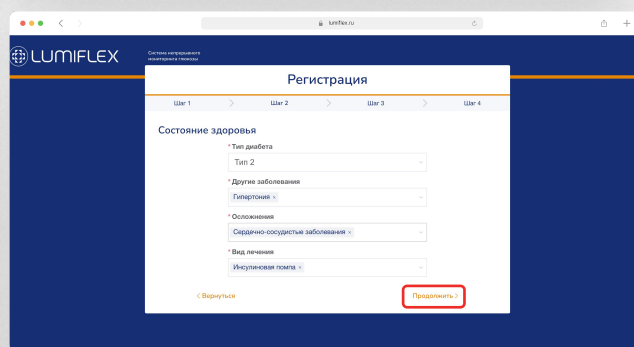
1. Перейдите на вкладку «Пациент» и нажмите «Зарегистрироваться».
2. Выберите тип профиля «Пациент» и нажмите «Продолжить».
3. Введите данные, связанные со здоровьем.

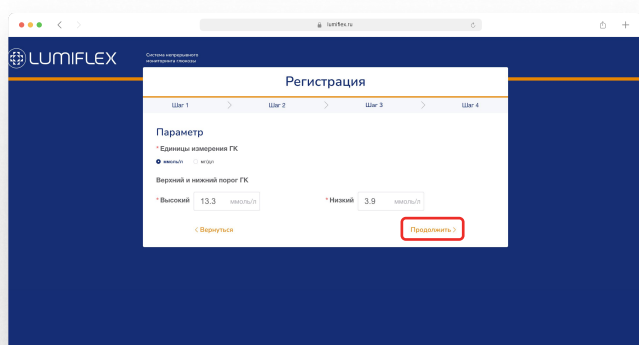

4. Установите предпочтительные единицы измерения и пороговые значения BG (глюкозы в крови).

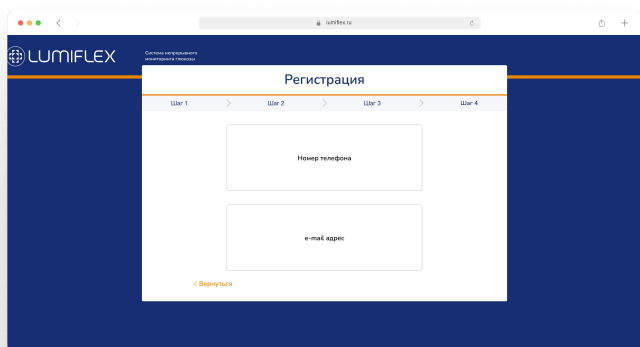

5. Выберите способ регистрации:
с использованием номера
мобильного телефона или адреса
электронной почты.

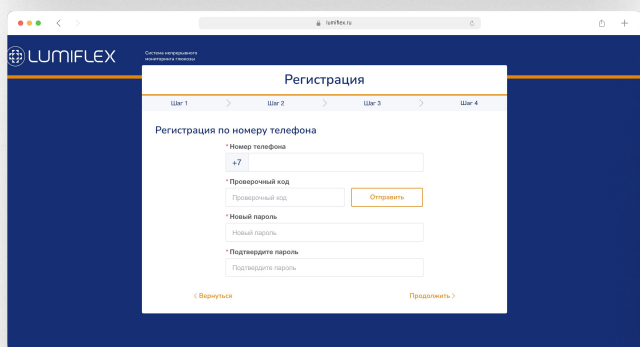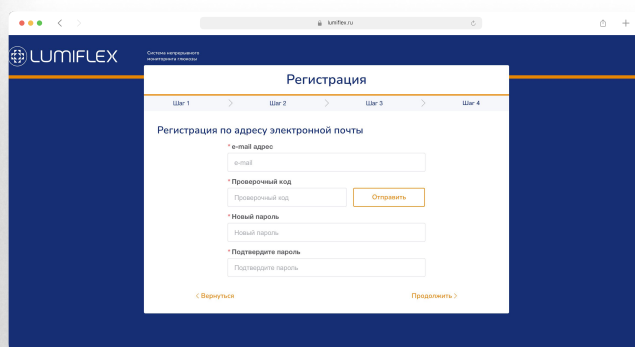Регистрация по номеру телефона

1. Введите номер телефона.
2. Нажмите кнопку **«Отправить»**.
Вам поступит СМС с кодом.
Введите его в поле **«Проверочный код»**.
3. Введите пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтвердите пароль»**.

Регистрация по адресу электронной почты

1. Введите ваш имейл-адрес.
2. Нажмите на кнопку **«Отправить»**. Вам поступит письмо с кодом. Введите его в поле **«Проверочный код»**.
3. Введите пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтвердите пароль»**.




Обратите внимание! Для регистрации в приложении используйте только **русский номер** мобильного телефона.

После ввода данных завершите регистрацию путем ввода кода верификации и установки пароля. Теперь вы можете войти в систему.

Вход в аккаунт после регистрации

1. Выберите вкладку «Пациент».
2. Выберите «Номер телефона» или «Ваш email-адрес».
3. Введите адрес электронной почты / номер телефона и пароль.
4. Нажмите кнопку «Вход в личный кабинет» для продолжения.

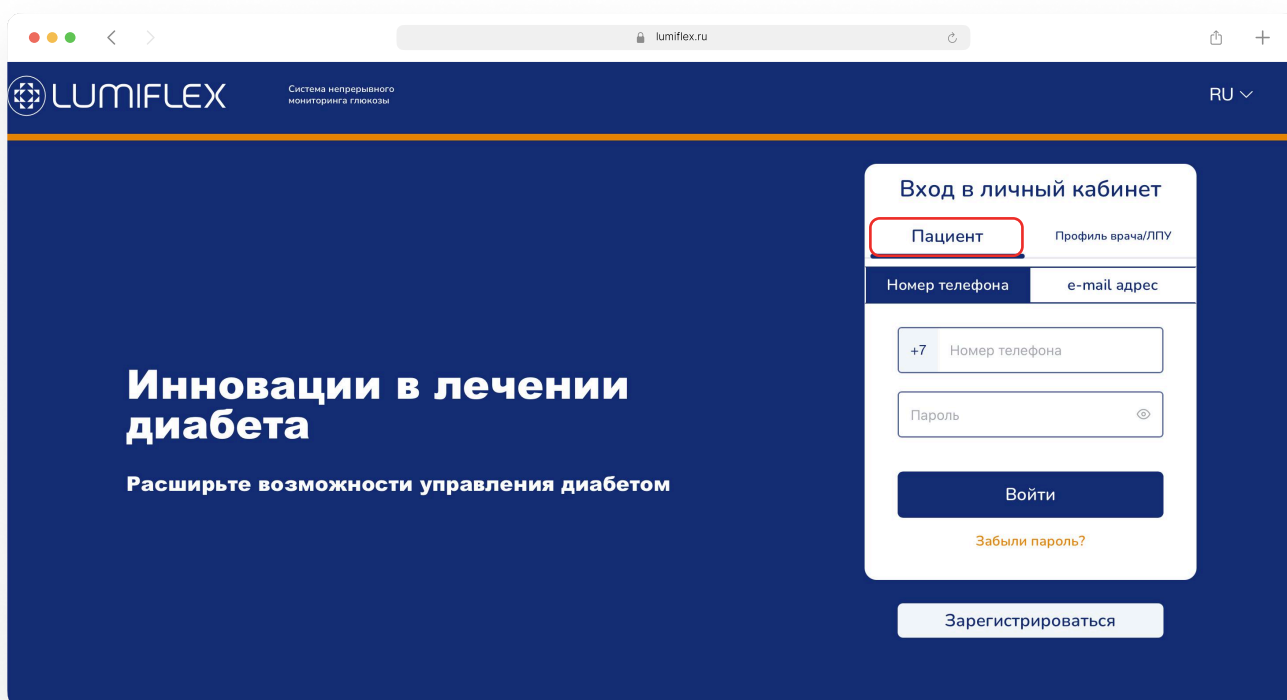
[Забыли пароль?](#)
[RU ▼](#)

Забыли пароль


1. Нажмите кнопку «Забыли пароль» и следуйте инструкциям для его сброса.
2. Выберите «Номер телефона» или «Ваш email-адрес».

Сменить язык


Выберите предпочитаемый язык из доступных вариантов.

Главная страница

История отчетов

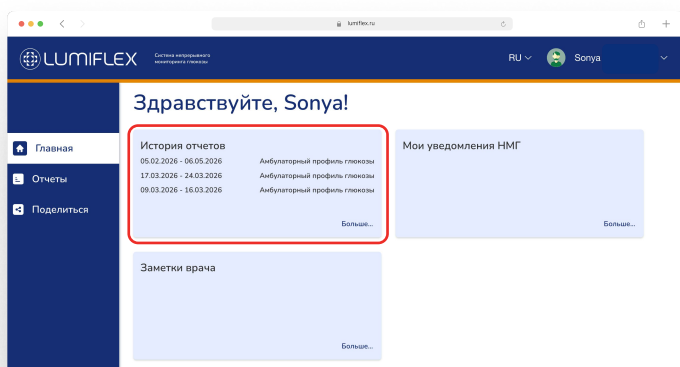

1. Нажмите на карточку **«История отчетов»** для быстрого обзора всех ваших прошлых записей о сгенерированных отчетах.

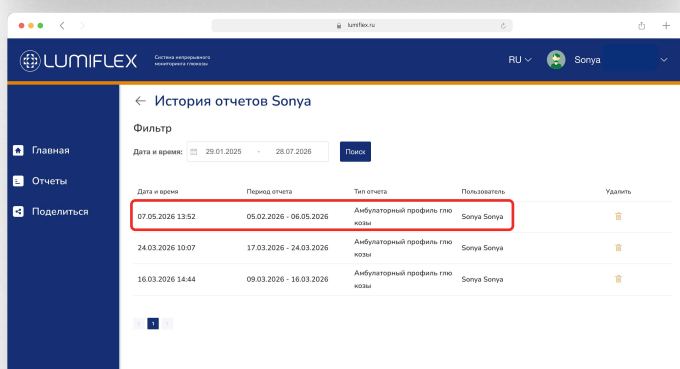


2. Просто щелкните в любой области строки выбранного отчета, чтобы открыть отчет и получить доступ к его содержимому.

Примечание

После установления связи между пациентами и врачами все отчеты, независимо от того, были ли они сгенерированы пациентами или врачами, могут быть просмотрены на этой странице.

Быстрый выбор


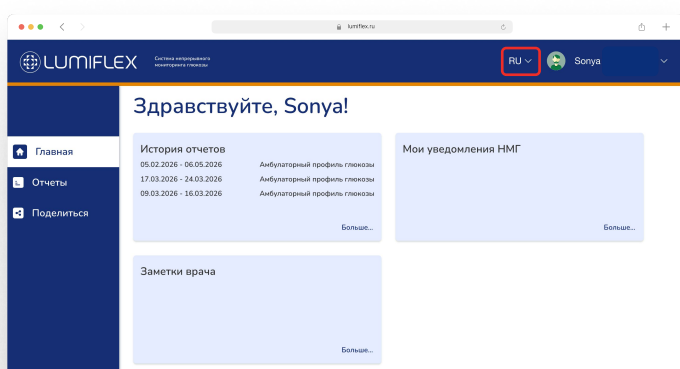


Поддерживает быстрый выбор языка и единиц измерения.


Главная страница

Заметки врача


Нажмите на карточку **«Заметки врача»** для быстрого обзора всех прошлых заметок вашего врача.

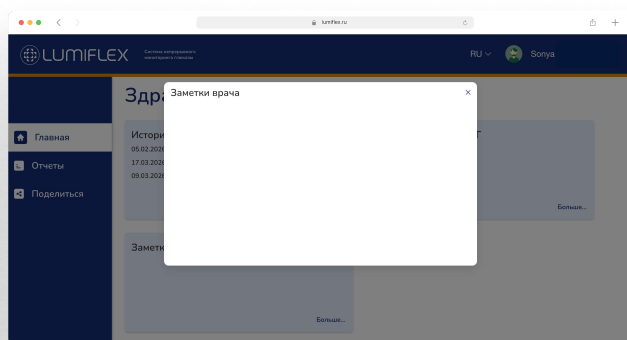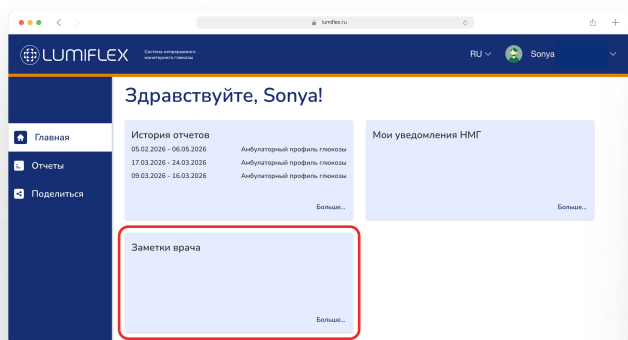

Уведомления подписчиков

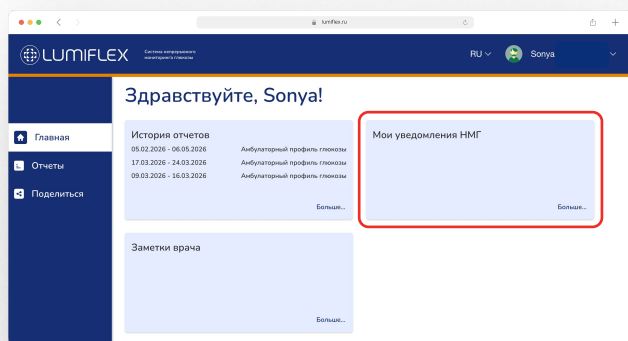


1. Нажмите на карточку **«Мои уведомления НМГ»** для быстрого обзора всех прошлых записей об оповещениях.

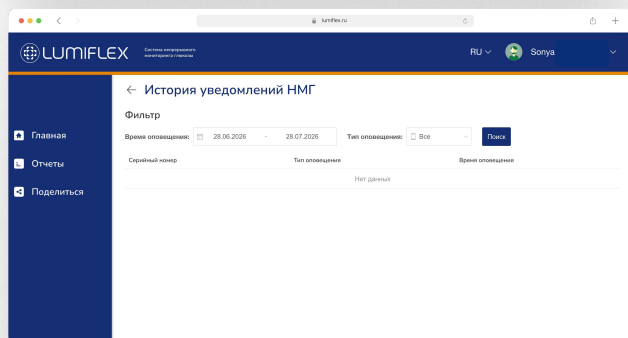


2. Используйте **«Тип оповещения»** и **«Время оповещения»** в качестве условий фильтрации для генерации списка оповещений.

Формирование отчета AGP

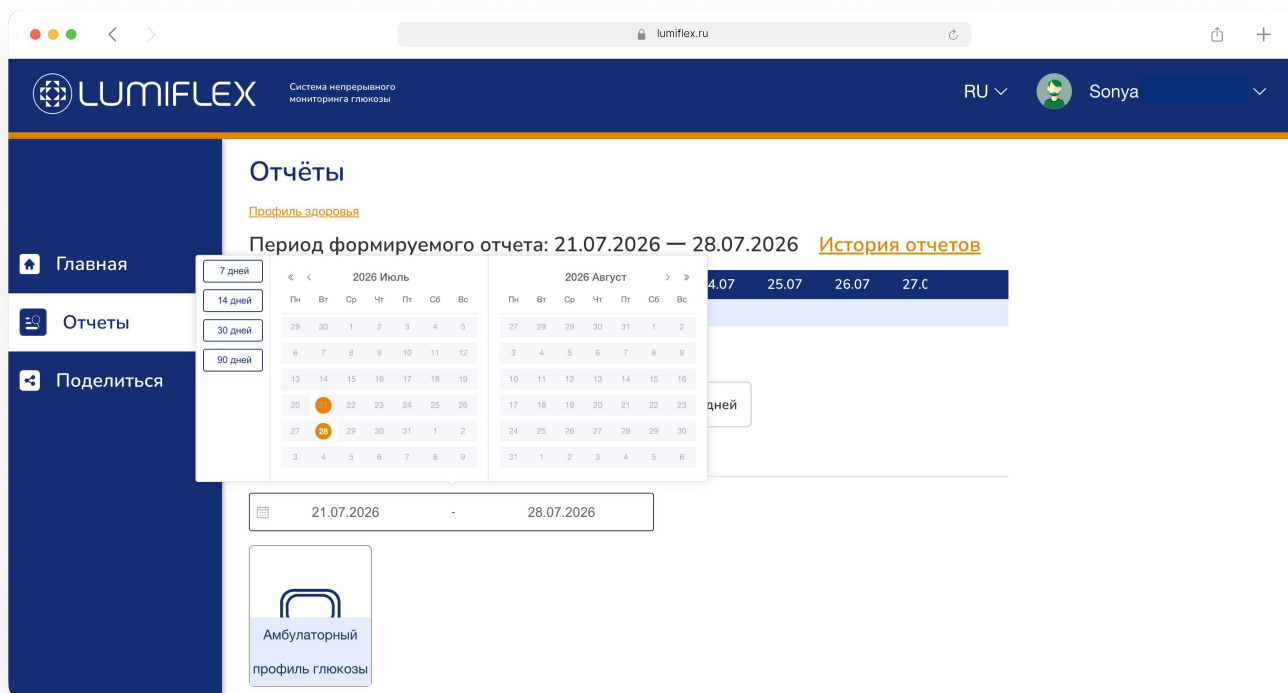

Выбор временного интервала

1. Нажмите на вкладку «Отчеты» слева.
2. Выберите предустановленные диапазоны (7, 14, 30, 90 дней) или настраиваемый период времени.
3. Нажмите «Создать отчет» для комплексного анализа данных.

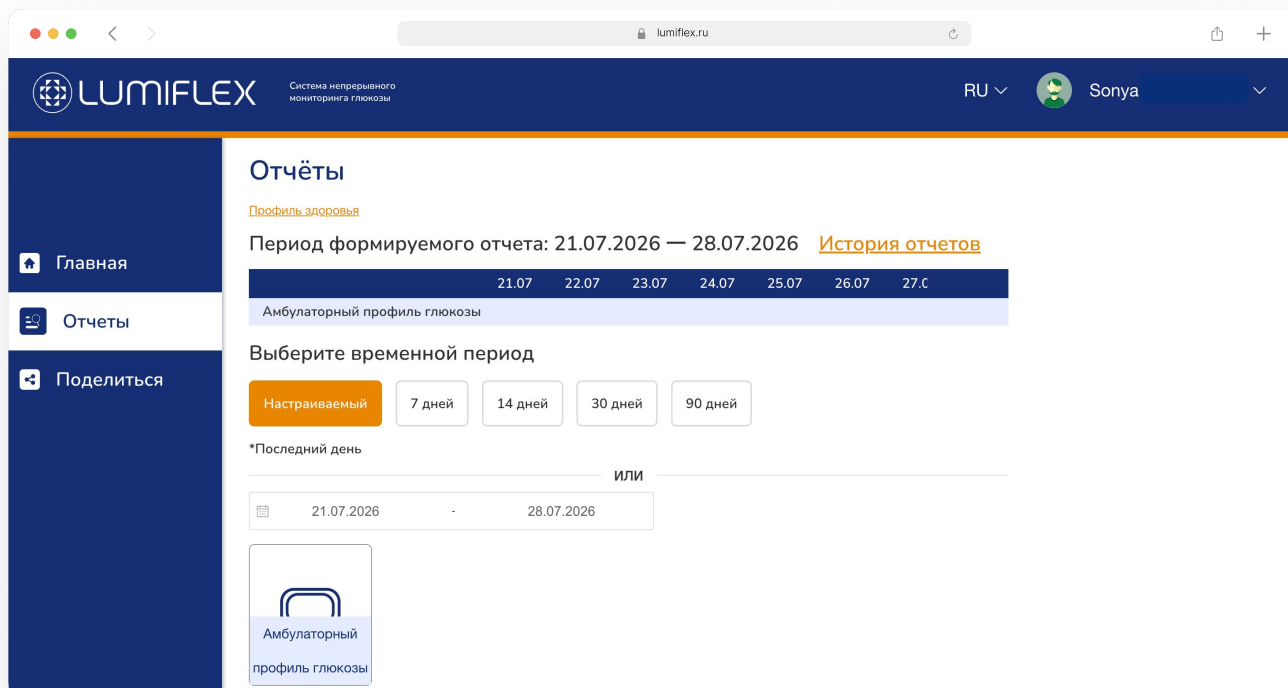



Формирование отчета AGP

История отчетов


Отчет AGP поддерживает интеграцию загруженных данных CGM.

История отчетов

Позволяет просматривать ранее сгенерированные отчеты, что помогает быстро открыть их без повторной генерации. Звездочка (*) рядом с именем отчета указывает на то, что отчет был сгенерирован врачом или кем-то другим от вашего имени, а не вами.

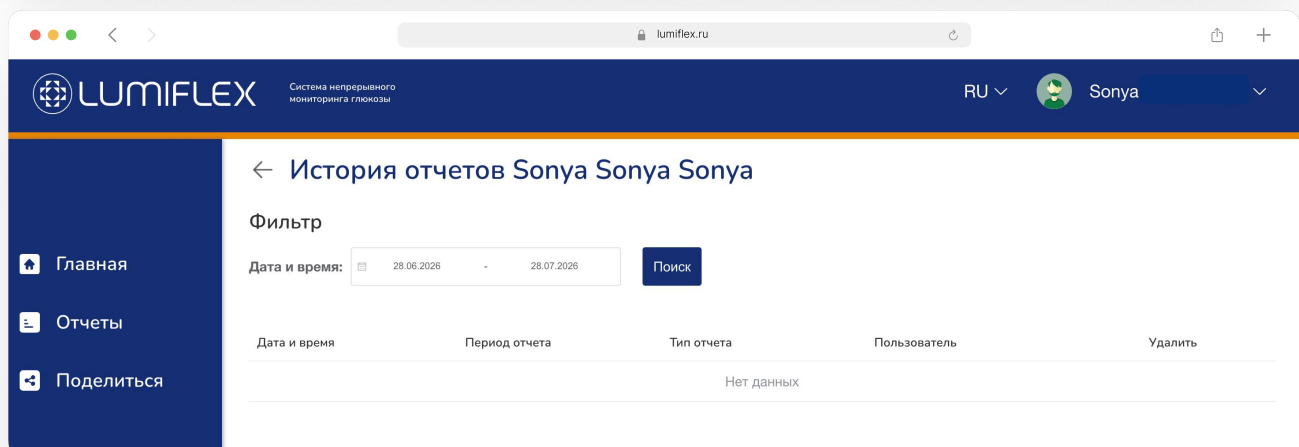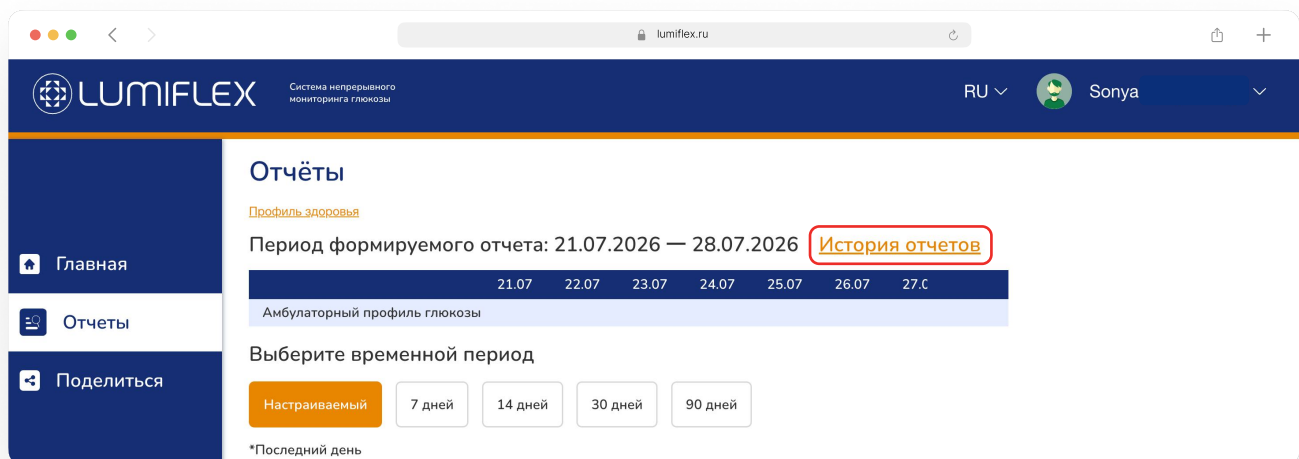

Настройка обмена данными об уровне глюкозы

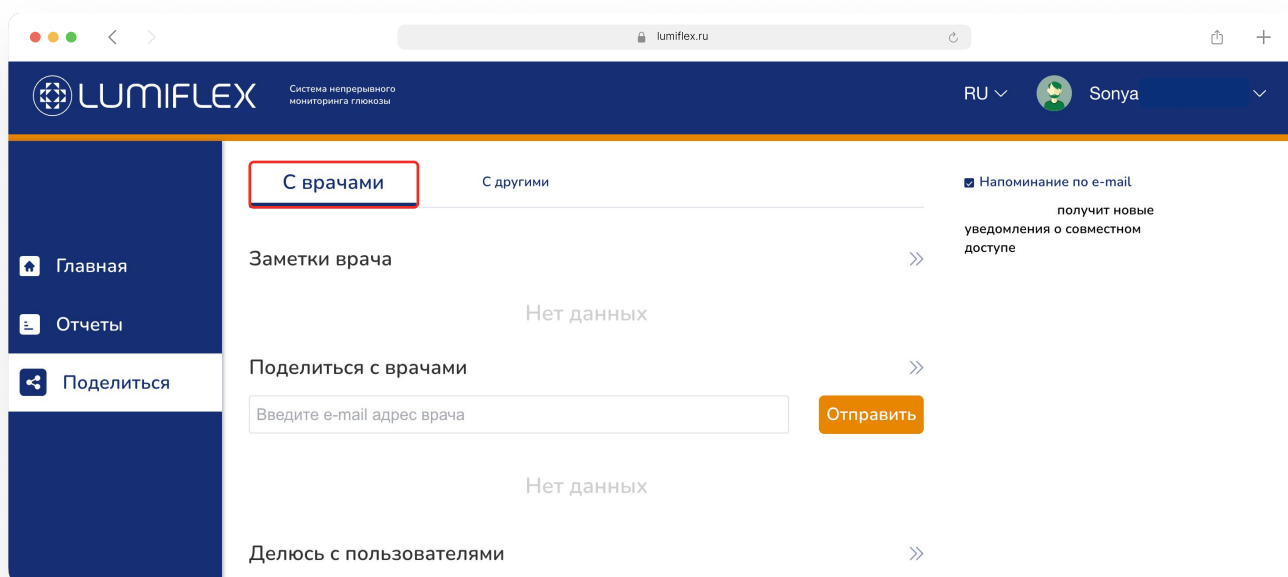


С врачами

- ✓ Функция «**Заметки врача**» позволяет просматривать сообщения или заметки, оставленные вашим врачом.
- ✓ Вы можете найти адрес электронной почты вашего врача и отправить приглашение. После согласия врача он может помочь вам загружать данные или генерировать отчеты, используя уже загруженные вами данные.
- ✓ Введенный адрес электронной почты должен быть зарегистрирован как учетная запись врача.
- ✓ Вы можете расторгнуть существующие отношения обмена данными с врачом, нажав кнопку «**Удалить**».

Ваш врач может сам инициировать обмен данными через свой аккаунт в облачном сервисе. В этом случае вам на телефон поступит СМС, где вы подтверждаете свое согласие на обмен данными. Также разрешить обмен данными с врачом можно через приложение Lumiflex LinX.

Настройка обмена данными об уровне глюкозы

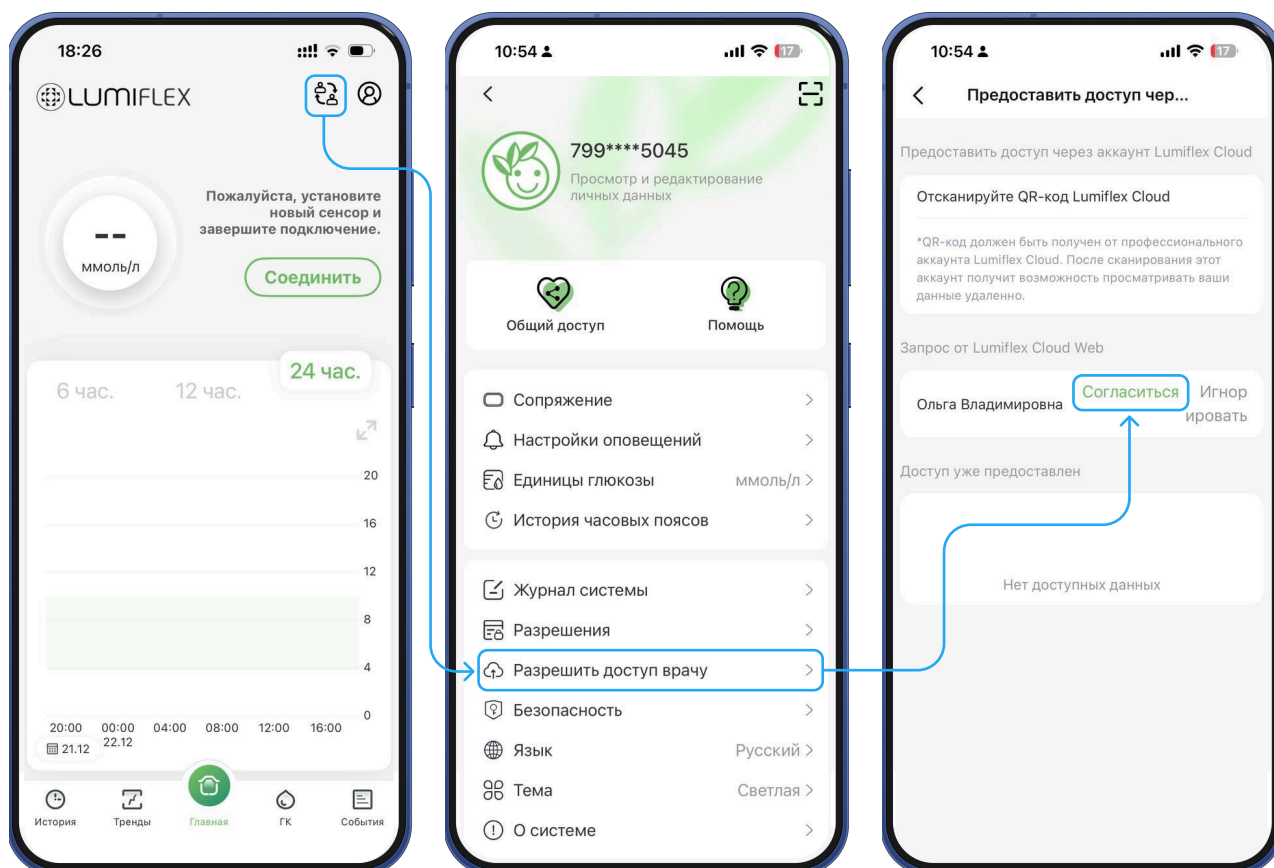


1. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу.
2. Выберите **«Разрешить доступ врачу»**.
3. Нажмите **«Согласиться»**.



После того как вы нажмете «Согласиться» в приложении, врач сможет просматривать ваши данные на платформе Lumiflex Cloud.

Настройка обмена данными об уровне глюкозы


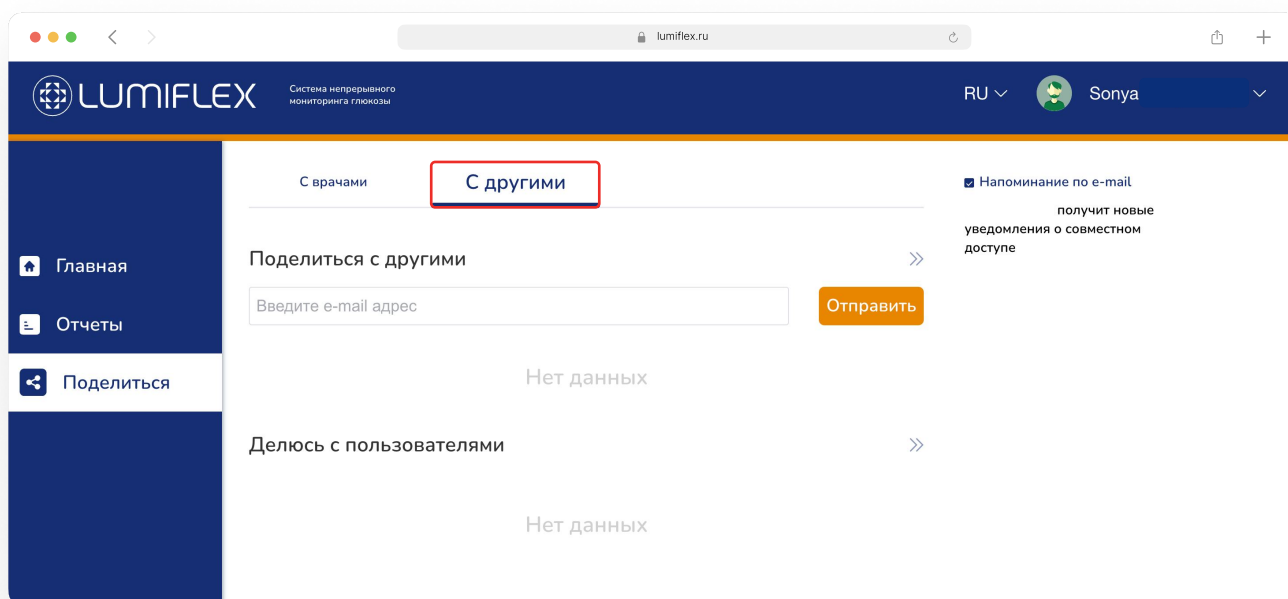


С другими пользователями

- ✓ Вы можете найти электронную почту других пользователей и отправить приглашение. После согласия других пользователей они смогут генерировать отчеты, используя уже загруженные вами данные.
- ✓ Введенный адрес электронной почты должен быть зарегистрирован как личная учетная запись.
- ✓ Вы можете расторгнуть существующие отношения обмена данными с другими пользователями, нажав кнопку **«Удалить»**.

Настройка обмена данными об уровне глюкозы


Разверните страницу «Запросы от меня» в разделе «Делюсь с пользователями» и просмотрите список разрешений, предоставленных другими. Щелкните по любому полю, чтобы войти в центр отчетов другого человека, где вы можете просматривать статистические данные и другие записи, которые он загрузил.

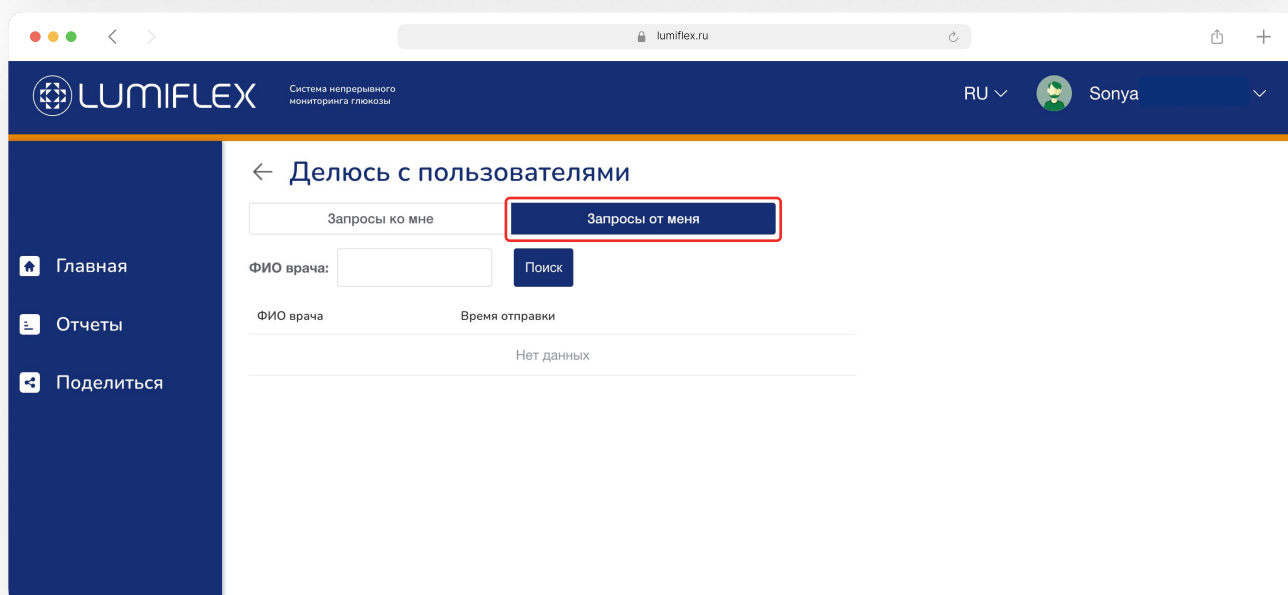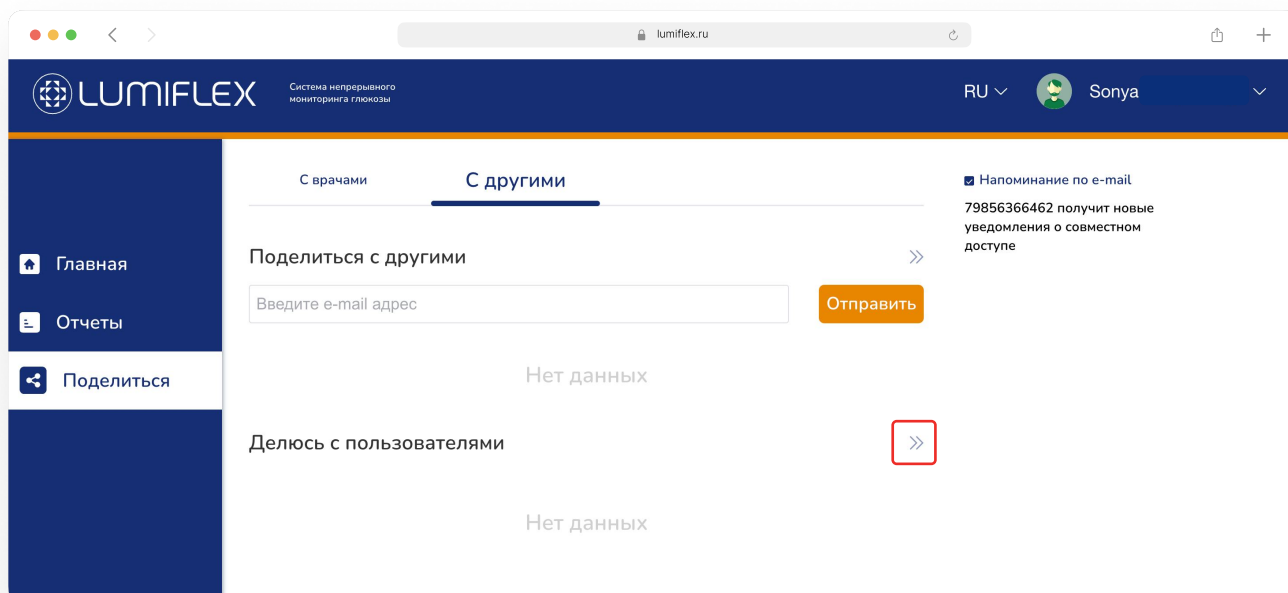


Настройки личного профиля

Настройки учетной записи

1. Нажмите здесь, чтобы быстро перейти на страницу личных настроек.

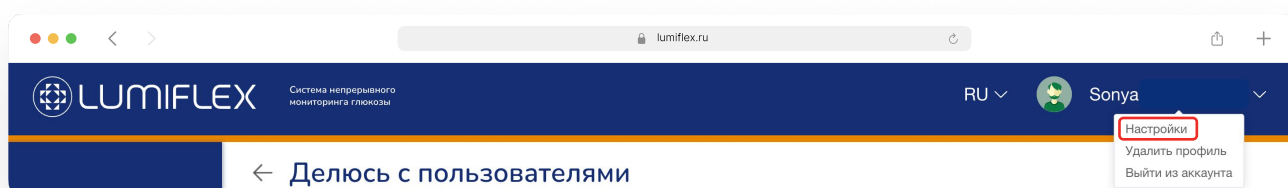


2. Нажмите на кружок, чтобы изменить фотографию профиля.

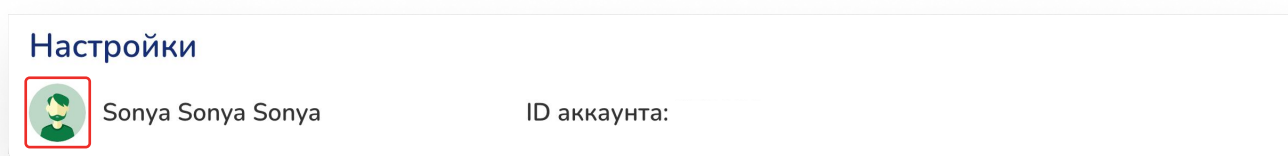

Настройки учетной записи


Вкладка «Аккаунт» позволяет менять информацию, связанную с учетной записью.

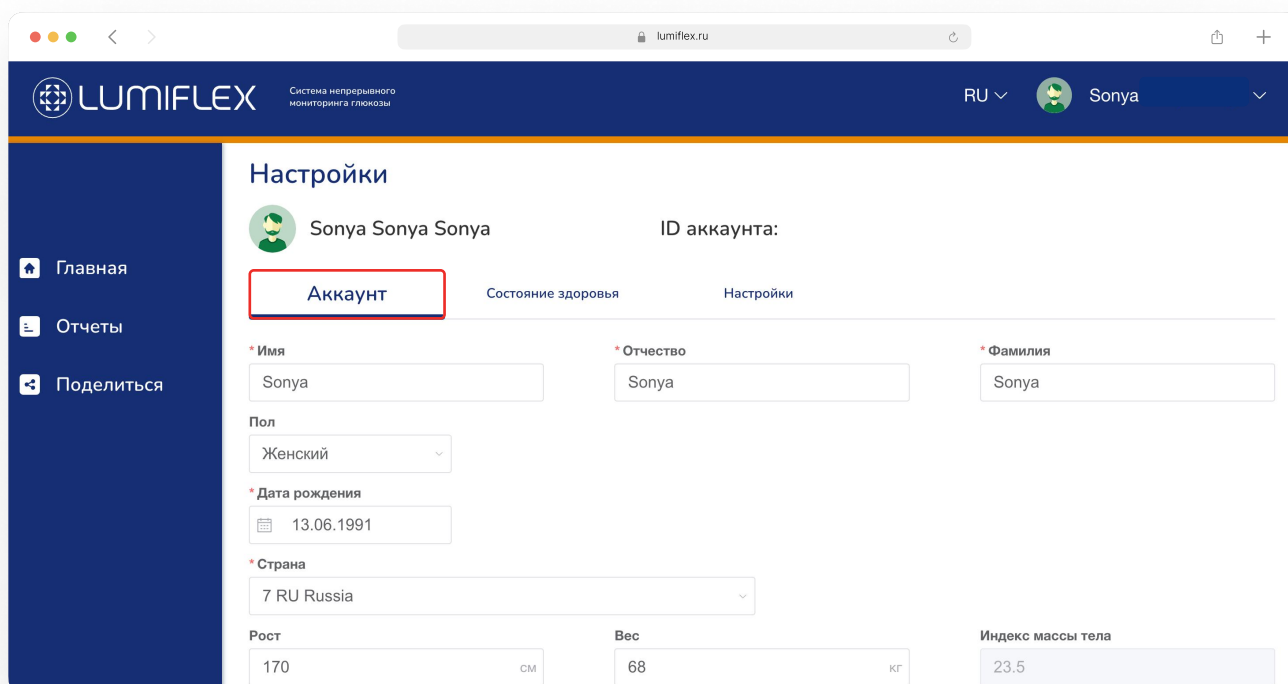

Настройки личного профиля

Настройки профиля здоровья

Вкладка «Состояние здоровья» позволяет менять информацию, связанную со здоровьем.

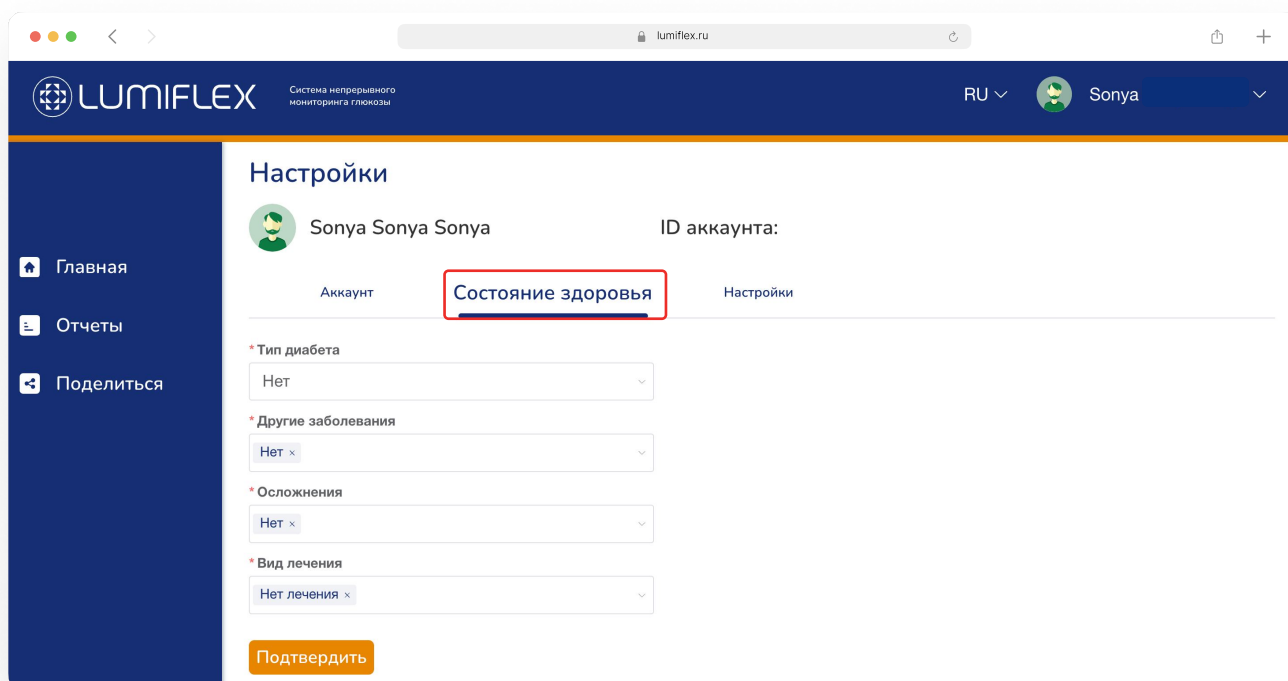

Настройки

Sonya Sonya Sonya ID аккаунта:

Аккаунт **Состояние здоровья** Настройки

* Тип диабета
Нет

* Другие заболевания
Нет


* Осложнения
Нет

* Вид лечения
Нет лечения

Подтвердить

Настройки учетной записи

Вкладка «Настройки» позволяет изменять настройки единиц измерения веб-интерфейса.

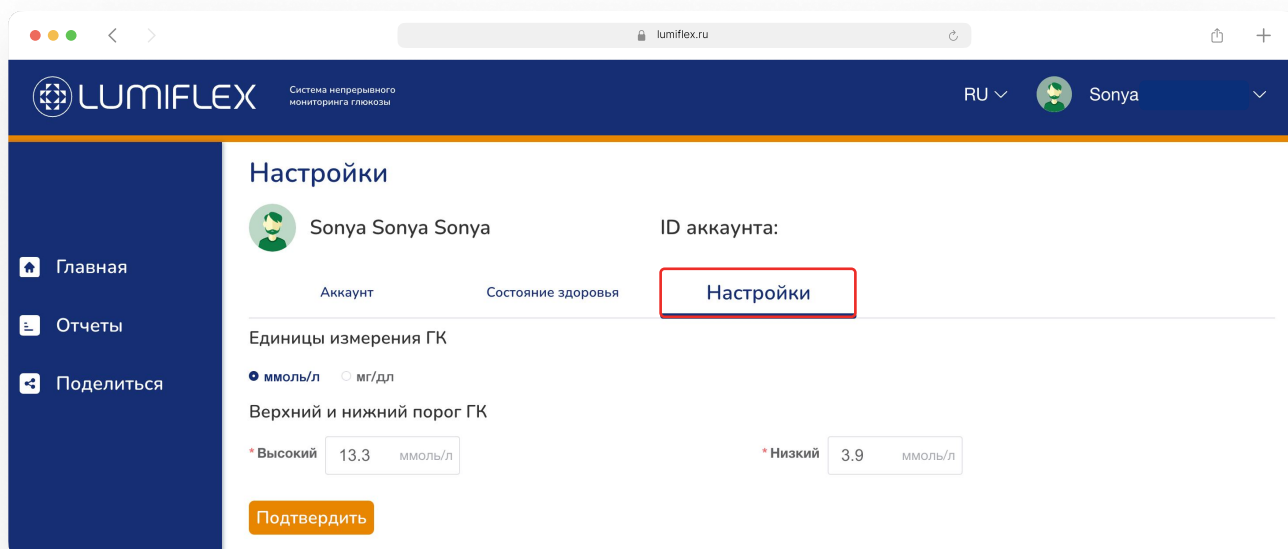

Настройки

Sonya Sonya Sonya ID аккаунта:

Аккаунт Состояние здоровья **Настройки**

Единицы измерения ГК
☒ ммоль/л ☐ мг/дл

Верхний и нижний порог ГК


* Высокий 13.3 ммоль/л * Низкий 3.9 ммоль/л

Подтвердить

Настройки личного профиля


Удалить профиль

Удаление профиля означает, что все исторические данные и связанная информация будут безвозвратно удалены.

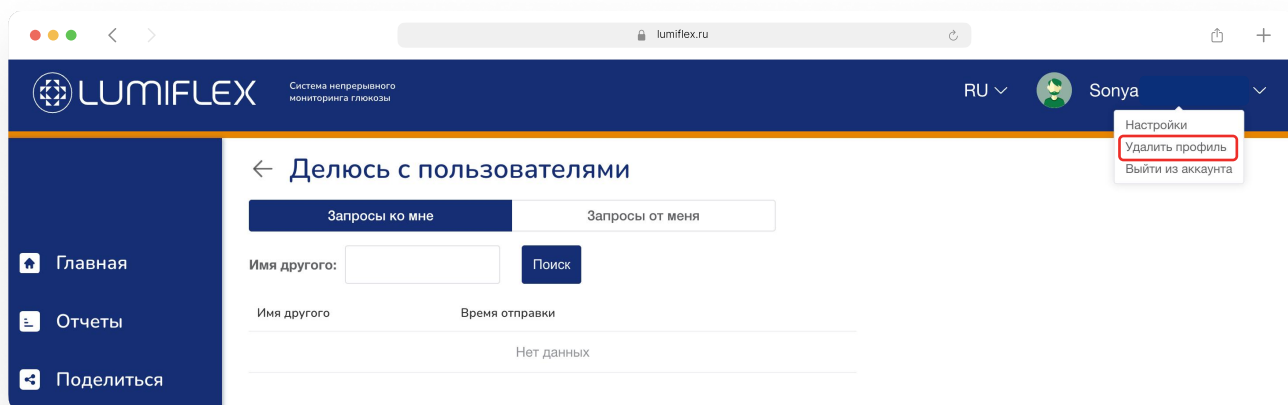

Выход из аккаунта

Нажмите здесь, чтобы выйти из своей учетной записи.

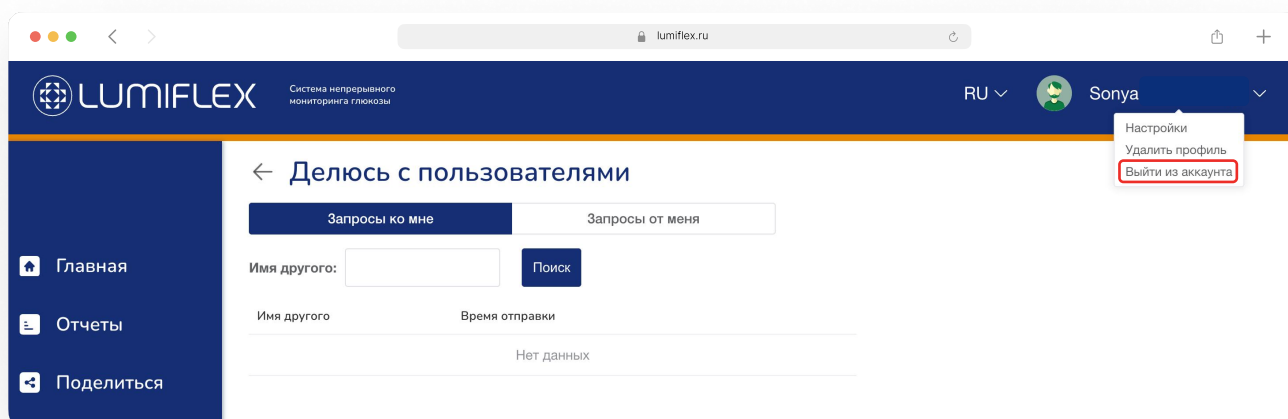

Для оперативной
поддержки свяжитесь
с нами



[Поддержка в Telegram](#)



[Поддержка в MAX](#)



help@lumiflex.ru