


Замена расходных материалов

Пошаговая инструкция

Замена расходных материалов

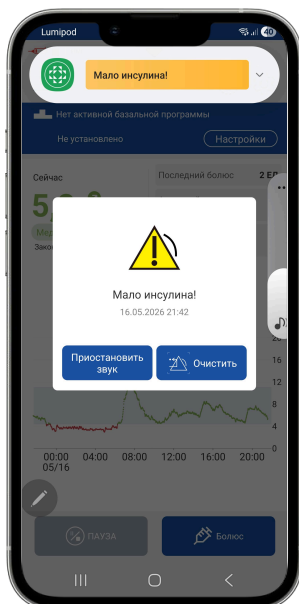

Стандартный срок эксплуатации Люмифлекс Lumipod до смены инфузионного набора и резервуара — **3 дня**. По истечении этого срока требуется замена инфузионного набора и резервуара.

Запустите приложение

Шаг 1


Запустите приложение Lumipod на телефоне.

Шаг 2

Нажмите на значок «Меню» в верхнем углу.

Шаг 3


Выберите пункт «Поменять резервуар».

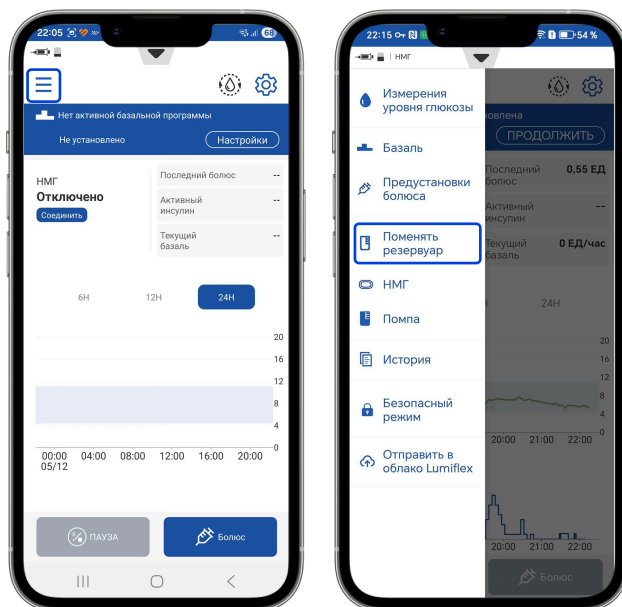

Снимите помпу

Шаг 1

Снимите помпу с фиксатора, следуя инструкции в приложении: сдвиньте ползунок в верхней части помпы, чтобы снять ее, и нажмите «Далее».



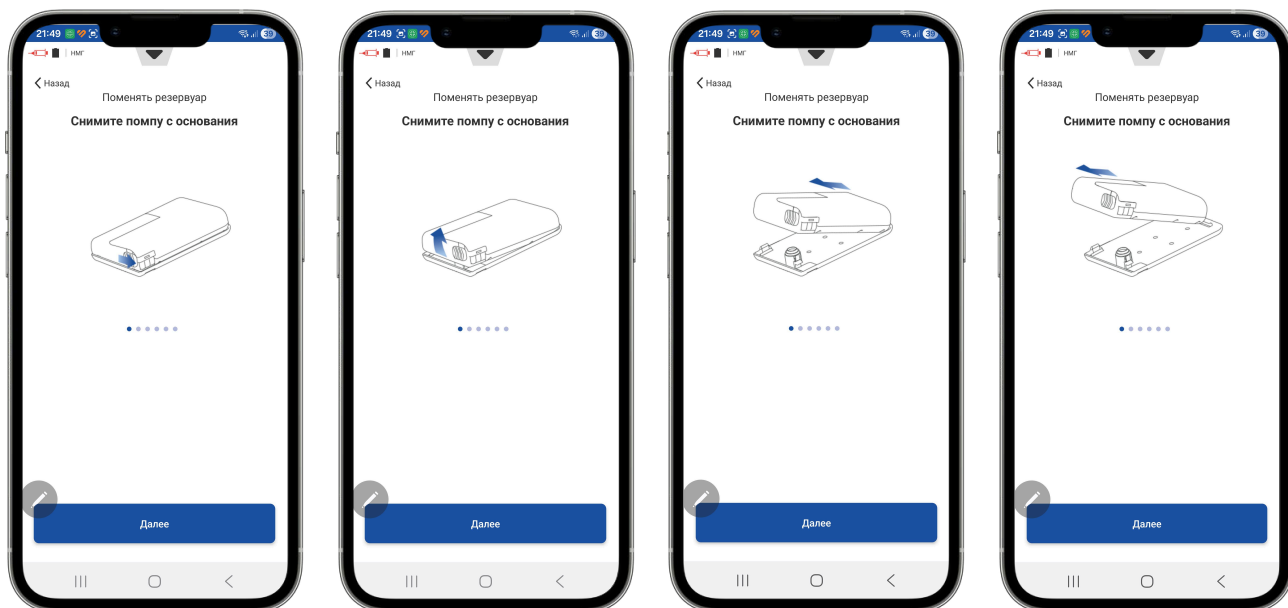


Шаг 2

Отсоедините край пластыря инфузионного набора, который установлен на тело. Продолжайте отделять пластырь от кожи, пока не будет удален инфузионный набор.

Перезапустите помпу

В приложении подтвердите обратный ход поршня, нажав «Перезапустить».

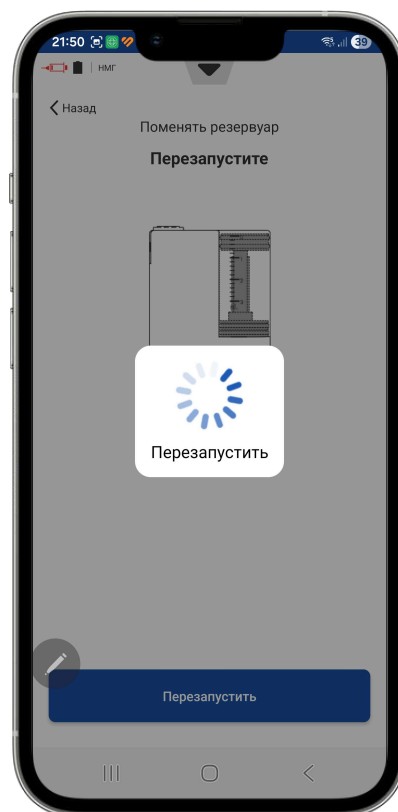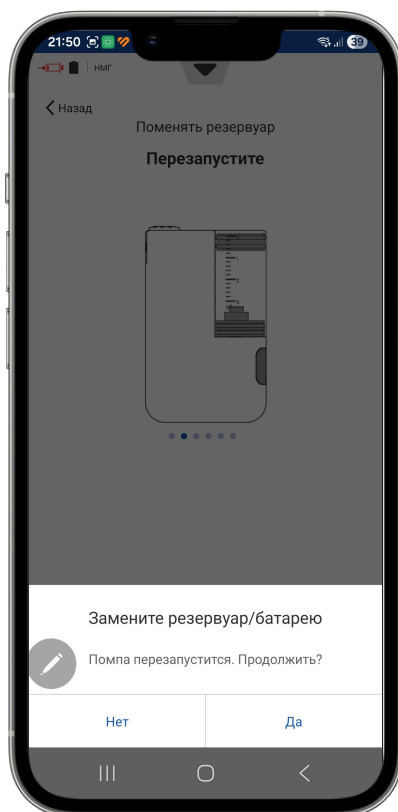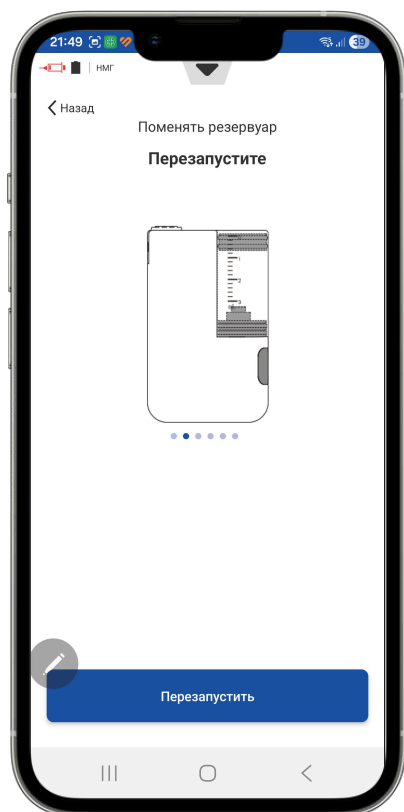

Зарядите помпу и заполните новый резервуар

Обратите внимание

- До установки инсулиновая помпа должна быть полностью заряжена, а инсулин должен быть комнатной температуры.
- Помпу необходимо заряжать с вставленным в нее использованным резервуаром.
- Не заряжайте помпу до полного использования инсулина, чтобы инсулин не потерял свою эффективность.
- Перезаряжайте помпу при каждой замене резервуара.
- Перед применением полностью заряженной помпы резервуар необходимо заменить на новый.

Установите новый инфузионный набор


При выборе места установки следуйте рекомендациям

- Предпочтительные места установки помпы в порядке убывания приоритета: Живот → Задняя поверхность плеча → Внешняя часть бедра → Поясница → Ягодицы.
- Важно избегать установки инфузионного набора на участки с уплотнениями и рубцами, а также на места, которые могут подвергаться механическому трению о другие предметы, такие как ремни, пояса или тесная одежда.

Важно!

- При наличии волос на выбранном участке их необходимо удалить.
- При установке инфузионного набора важно отступить **не менее 7,5 сантиметров** от сенсора системы непрерывного мониторинга глюкозы.
- Не устанавливайте новый инфузионный набор на то же место, где был установлен предыдущий, — чередуйте места установки!





Установите заполненный резервуар

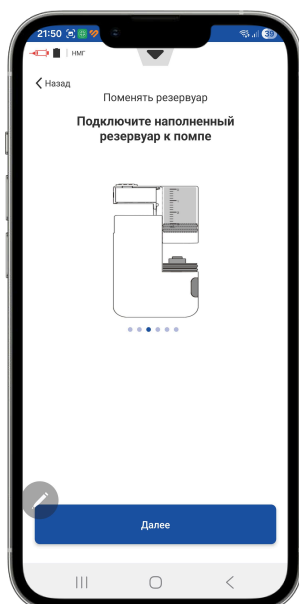

Перейдите в приложение и следуйте инструкциям по установке заполненного резервуара на экране. Затем нажмите «Далее».




Заполните резервуар

Нажмите и удерживайте кнопку «Заполнить», пока из кончика иглы резервуара не появится капля инсулина.

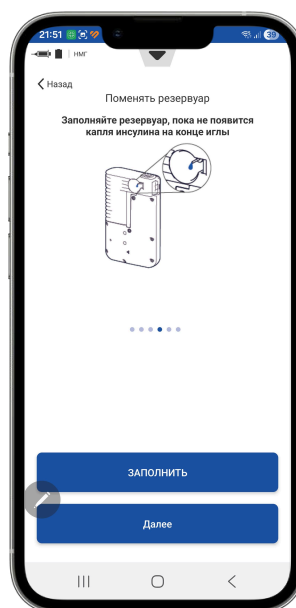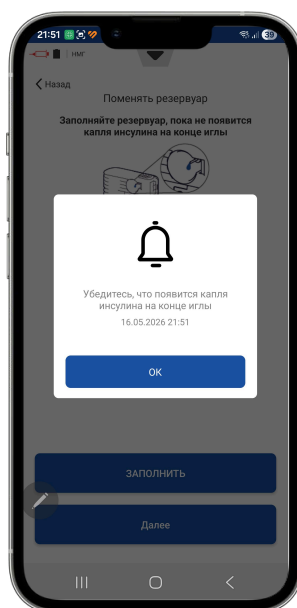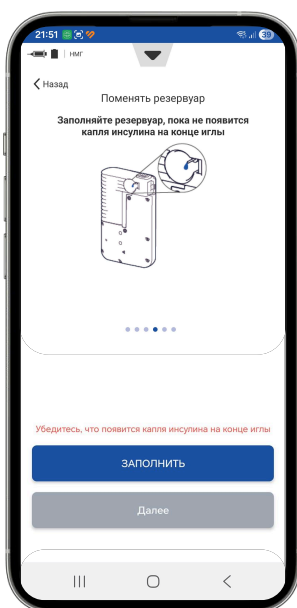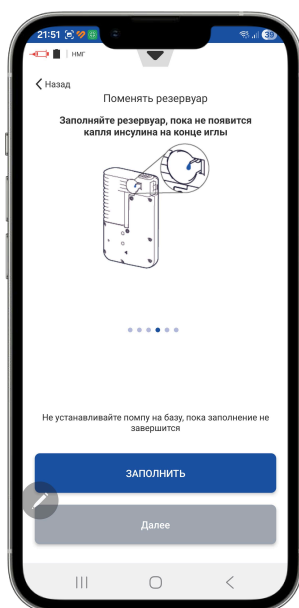


Установите помпу

1. Установите помпу на фиксатор, следуя инструкции в приложении.

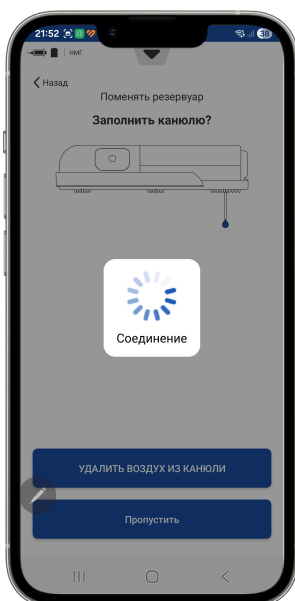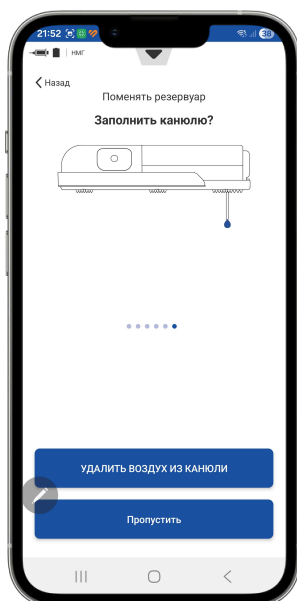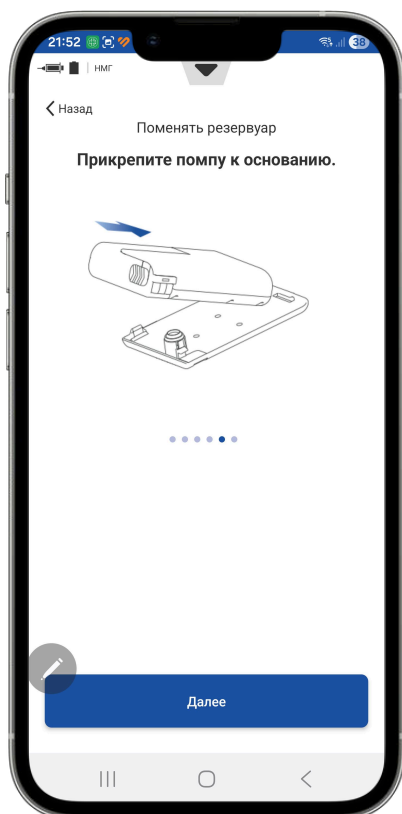

2. Вернитесь к приложению, нажмите «Далее» и выберите «Удалить воздух из канюли».

Расходные материалы успешно заменены!

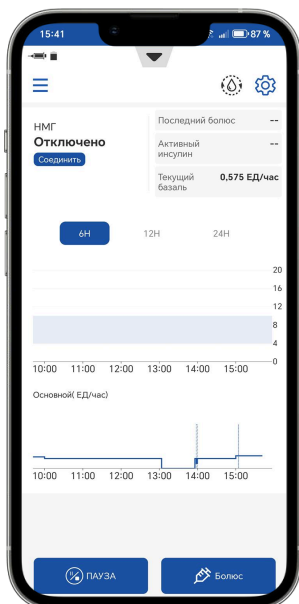

Теперь вы можете продолжить использование и перейти к настройкам работы помпы Люмифлекс Lumiprod.



Для оперативной
поддержки свяжитесь
с нами



[Поддержка в Telegram](#)



[Поддержка в MAX](#)



lumipod@lumiflex.ru